



# Leica DM750 Manual

## Descripción general del capítulo

<b>Normas de seguridad</b>	<b>4</b>
<b>Leica DM750</b>	<b>15</b>
<b>¡Preparados!</b>	<b>18</b>
<b>¡Listos!</b>	<b>28</b>
<b>¡Ya!</b>	<b>42</b>
<b>Cuidado del microscopio</b>	<b>44</b>
<b>Medidas</b>	<b>47</b>

# Contenido

<b>Normas de seguridad</b>	<b>4</b>
Concepto de seguridad	5
Símbolos empleados en este manual de instrucciones	6
Indicaciones importantes	7
Instrucciones de uso	8
Instrucciones de uso (continuación)	9
Riesgos para la salud y peligros relacionados con el uso	10
Información para la persona responsable del instrumento	11
Instrucciones para el cuidado del instrumento	12
Accesorios, mantenimiento y reparación	13
Datos eléctricos y condiciones ambientales	14
<b>Leica DM750</b>	<b>15</b>
Introducción	16
Desembalaje	17

<b>¡Preparados!</b>	<b>18</b>
Iluminación de platina inferior	19
Montaje de los tubos visores	20
Tubo visor Leica EZ – oculares integrados	21
Tubo visor estándar de Leica – oculares por separado	23
Protectores oculares	24
Montaje de objetivos	25
Montaje del condensador de platina inferior	26
<b>¡Listos!</b>	<b>28</b>
Encendido del microscopio	29
Centraje completo del condensador	30
Uso del condensador	32
Preparación para la observación de un filtro con muestra	33
Enfoque (ajuste de la nitidez)	34
Ajuste del tubo visor	35
Ajuste Koehler	37
Técnica de inmersión en aceite	39
Desconexión retardada	41

<b>¡Ya!</b>	<b>42</b>
¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya!	43
<b>Cuidado del microscopio</b>	<b>44</b>
Mantenimiento general	45
<b>Medidas</b>	<b>47</b>



# Normas de seguridad

## Concepto de seguridad

Los módulos individuales de los microscopios de la serie Leica DM incluyen un CD-ROM interactivo con todos los manuales de usuario correspondientes en varios idiomas. Guárdelo en lugar seguro y siempre al alcance del usuario. También es posible descargar e imprimir manuales de instrucciones y actualizaciones desde nuestra página web: [www.leica-microsystems.com](http://www.leica-microsystems.com).

En este manual de funcionamiento se describen las funciones especiales de los módulos individuales de los microscopios de la serie Leica DM y se recogen importantes instrucciones relacionadas con la seguridad de funcionamiento, el mantenimiento y los accesorios.

El folleto "Concepto de seguridad" contiene información adicional relativa al trabajo de servicio, los requisitos, el manejo del microscopio, los accesorios y los accesorios eléctricos, así como instrucciones de seguridad generales.

Puede combinar artículos de sistemas individuales con otros de proveedores externos. Lea las instrucciones de uso y las normas de seguridad del fabricante.

Lea los manuales de instrucciones mencionados antes del montaje, puesta en servicio y uso del microscopio. Y ante todo respete todas las normas de seguridad.

Con el fin de mantener el estado de suministro del aparato y asegurar un servicio sin riesgos, el usuario deberá tener presentes las indicaciones y advertencias que se especifican en estos manuales de instrucciones.

# Símbolos empleados en este manual de instrucciones

## Advertencia de peligro



Este icono señala información que es imprescindible leer y cumplir.

Si no lo tiene en cuenta ...

- pueden producirse daños a personas
- pueden provocarse averías o daños en los instrumentos.

## Advertencia de tensión eléctrica peligrosa



Este icono señala información que es imprescindible leer y cumplir.

Si no lo tiene en cuenta ...

- pueden producirse daños a personas
- pueden provocarse averías o daños en los instrumentos.

**Peligro: superficie caliente.**



Este icono le advierte de aquellas superficies calientes que no se deben tocar, como por ejemplo las lámparas.

## Información importante



Este icono aparece junto a información adicional o explicaciones más detalladas.

## Indicaciones complementarias

- Este símbolo que aparece dentro del texto indica que se trata de información y explicaciones adicionales.

# Indicaciones importantes

## Descripción

El microscopio Leica DM750 está a la altura de la tecnología punta actual. Aun así es posible que se presenten ciertos peligros durante su utilización. A continuación se describen los riesgos potenciales.



Antes de proceder al montaje, puesta en servicio o uso de los instrumentos, lea este manual de instrucciones. Y ante todo respete todas las normas de seguridad.

## Dirección de contacto

*Leica Microsystems (Schweiz) AG  
Industry Division  
Max Schmidheiny Strasse 201  
CH-9435 Heerbrugg (Suiza)*

## Manual de instrucciones

Este manual contiene importantes instrucciones relacionadas con el mantenimiento y accesorios del instrumento, además de explicar cómo utilizarlo de manera segura.



El microscopio Leica DM750 incorpora un CD-ROM interactivo con los manuales de usuario correspondientes. Guárdelo en lugar seguro y siempre al alcance del usuario. Los manuales de instrucciones y las actualizaciones también se pueden descargar e imprimir desde nuestra página web [www.leica-microsystems.com](http://www.leica-microsystems.com)

## Accesorios de terceros proveedores

Puede combinar artículos de sistemas individuales con otros de proveedores externos. Lea las instrucciones de uso y las normas de seguridad del fabricante.

## Estado de suministro

Con el fin de mantener el estado de suministro del aparato y asegurar un servicio sin riesgos, el usuario deberá tener presentes las indicaciones y advertencias que se especifican en estos manuales de instrucciones.

## Normativa legal

Observe las prescripciones generales vigentes y específicas de cada país en materia de prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

## Declaración de conformidad CE

Los accesorios eléctricos han sido desarrollados de acuerdo con los últimos adelantos técnicos y satisfacen la declaración de conformidad de la UE.

# Instrucciones de uso

## Uso

El microscopio Leica DM750 es un instrumento óptico que utiliza el aumento y la iluminación para mejorar la visibilidad de los objetos. Se lo emplea para observar y documentar.

El microscopio Leica DM750 puede utilizarse únicamente en estancias cerradas y colocado sobre un suelo sólido.

El microscopio Leica DM750 puede utilizarse en salas blancas sin ningún inconveniente.



Coloque el microscopio Leica DM750 de modo que pueda desconectarse de la alimentación eléctrica en cualquier momento. El cable de alimentación debe encontrarse accesible en todo momento, ya que la alimentación eléctrica actuará como red eléctrica para desconectar el dispositivo.

## Lugar del uso

Use los instrumentos sólo en salas cerradas, libres de polvo y entre +10 °C y +40 °C. Proteja los dispositivos contra el aceite, productos químicos y un exceso de humedad. Si los utiliza al aire libre, protéjalos contra el polvo y la humedad. Nunca utilice dispositivos eléctricos en el exterior. Los dispositivos eléctricos deben situarse, como mínimo, a 10 cm de la pared y de cualquier sustancia inflamable.

Deben evitarse las oscilaciones fuertes de temperatura, la luz directa del sol y las vibraciones. Estas circunstancias pueden alterar las mediciones y los registros microfotográficos.



En las zonas de clima cálido o tropical, los componentes requieren un cuidado especial para evitar la formación de hongos.

## Uso no previsto



Utilizar el instrumento de cualquier modo que no respete las indicaciones detalladas en este manual de instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños materiales. Eso puede afectar las funciones de las medidas de protección proporcionadas.



No instale en ningún caso otro tipo de enchufe (NEMA 5-15P) ni desatornille ningún componente mecánico a menos que las instrucciones así lo indiquen.



Los dispositivos y accesorios descritos en este manual de instrucciones han sido sometidos a pruebas referentes a su seguridad o potenciales peligros.

## Instrucciones de uso (continuación)



Cualquier manipulación del instrumento, modificación o utilización de componentes de otras marcas no recogidos en estas instrucciones debe consultarse con el representante de Leica competente.



La manipulación no autorizada del dispositivo o su uso inadecuado implican la pérdida de cualquier derecho de garantía.

### Transporte

A ser posible, utilice el embalaje original para enviar o transportar los módulos individuales.

Para evitar daños debidos a vibraciones, desmonte todos los componentes móviles que (según el manual de instrucciones) pueden ser montados y desmontados por el cliente, y embálelos por separado.

### Eliminación

La eliminación de residuos debe cumplir con las normas y leyes de cada país.

### Montaje en productos externos

Al montar productos Leica en productos de otras marcas, el fabricante de todo el sistema, o aquél que lo ponga en servicio, será el responsable de que se cumplan todas las directrices, leyes e instrucciones de seguridad aplicables.

# Riesgos para la salud y peligros relacionados con el uso

## Riesgos para la salud



Los lugares de trabajo con microscopios facilitan y mejoran las tareas de visualización, pero también imponen importantes exigencias en lo que a los ojos y músculos de los mismos respecta. En función de la duración ininterrumpida de las actividades, pueden aparecer manifestaciones de astenopía y problemas musculoesqueléticos. Por esta razón, deben tomarse las medidas adecuadas para reducir el esfuerzo asociado al trabajo:

- Disposición óptima del puesto de trabajo
- Cambios frecuentes de actividad
- Formación exhaustiva del personal, con énfasis en los aspectos de ergonomía y organización del trabajo.

El diseño ergonómico y la fabricación de los microscopios de la serie Leica pretenden reducir al máximo el esfuerzo realizado por el usuario.

## Riesgo de infección



El contacto directo con los oculares puede representar una vía potencial de transmisión de infecciones bacterianas y virales del ojo.



Mediante el empleo de oculares personales o anteojeras desmontables se pueden minimizar tales riesgos.

## Peligros relacionados con el uso

- El microscopio Leica DM750 deberá conectarse únicamente a un enchufe con toma de tierra.
- El microscopio Leica DM750 no deberá utilizarse a menos que se encuentre en unas condiciones de funcionamiento adecuadas.

## LED Clase 1/LED 1 Laser Product

La iluminación cumple los requisitos de la clase 1 de láser de acuerdo con la norma IEC 60825-1 "Seguridad de los productos LED".

**Precaución:** La utilización de los controles o ajustes o el rendimiento de los procedimientos que difieran de los aquí especificados puede tener como resultado la exposición a radiacio-

**Class 1  
LED Product**

**LED class 1**

## Información para la persona responsable del instrumento

### Información para la persona responsable del instrumento

- Asegúrese de que el microscopio Leica DM750 sea utilizado únicamente por personal cualificado.
- Asegúrese de que este manual de usuario se encuentre siempre disponible junto con el microscopio Leica DM750.
- Lleve a cabo inspecciones regulares para verificar que los usuarios autorizados respetan las normas de seguridad.
- Al instruir a nuevos usuarios, hágalo de forma completa y explíqueles el significado de los mensajes y signos de advertencia.
- Asigne responsabilidades individuales para encender el instrumento, utilizarlo y realizar tareas de mantenimiento, y supervise que se cumplan correctamente tales responsabilidades.
- No utilice el microscopio Leica DM750 a menos que se encuentre en perfectas condiciones.
- Informe a su representante de Leica o a Leica Microsystems (Schweiz) AG, Industry Division, 9435 Heerbrugg, Suiza, de inmediato acerca de cualquier defecto que presente el producto y que pudiese ocasionar lesiones o daños.
- Si utiliza accesorios de otros fabricantes con el microscopio Leica DM750, asegúrese de que dicho fabricante confirme la seguridad de la ingeniería y la utilización inofensiva del producto y siga las instrucciones contenidas en el manual de uso del producto.
- Las modificaciones y tareas de mantenimiento en el microscopio Leica DM750 únicamente deberán llevarlas a cabo profesionales expresamente autorizados por Leica.
- Deben utilizarse únicamente repuestos Leica originales al reparar o acondicionar el producto.
- Una vez realizado el mantenimiento o las modificaciones técnicas, debe reconfigurarse la unidad según nuestros requisitos técnicos.
- Leica no asume ninguna responsabilidad en caso de que la unidad haya sido modificada, reparada o acondicionada por personas no autorizadas, se hayan realizado tareas de mantenimiento inadecuadas no efectuadas por Leica o se haya utilizado la unidad de manera incorrecta.
- La instalación eléctrica del edificio debe respetar las normas del país; por ejemplo, se recomienda utilizar protección eléctrica contra fugas a tierra (protección contra corrientes de avería).

# Instrucciones para el cuidado del instrumento

## Observaciones generales

- Proteja el microscopio Leica DM750 frente a la humedad, los vapores, los ácidos y las sustancias alcalinas y corrosivas. No almacene productos químicos cerca del instrumento.
- Proteja el microscopio Leica DM750 del aceite y la grasa. No engrase ni lubrique nunca las superficies de guía ni las partes mecánicas.
- Siga las indicaciones del fabricante del desinfectante.
- Se recomienda firmar un contrato de servicio con el departamento de servicio de Leica.

## Limpieza de las partes plásticas o con recubrimiento

- El polvo y las partículas de suciedad deben quitarse con un cepillo suave o un paño de algodón sin pelusas.
- Quite la suciedad más gruesa con un paño desechable humedecido.
- La suciedad adherida puede eliminarse empleando éter de petróleo o alcohol.
- NO utilizar acetona, xileno ni diluyentes que contengan nitrocomponentes.
- No limpie jamás con productos químicos las superficies de color ni los accesorios provistos de componentes de goma. Podría dañar las superficies y las partículas desprendidas podrían contaminar las preparaciones.

## Limpieza de las superficies de vidrio

- Elimine el polvo empleando un cepillo de cerdas fino, seco y limpio. También puede utilizar un soplador manual o una aspiradora.
- Quite la suciedad con un paño limpio humedecido en agua destilada.
- La suciedad difícil puede eliminarse empleando alcohol, cloroformo o éter de petróleo.

# Accesorios, mantenimiento y reparación

## Accesorios

Únicamente deberán utilizarse los siguientes accesorios con el microscopio Leica DM750:

- Los accesorios Leica descritos en este manual de instrucciones.
- Otros accesorios, siempre que Leica los haya aprobado de manera expresa como "técnicamente seguros" en este contexto.

## Mantenimiento

- El microscopio Leica DM750 no requiere prácticamente mantenimiento alguno. A fin de asegurar que siempre funcione de manera segura y fiable, se le recomienda tomar la precaución de solicitar el mantenimiento de la unidad a la organización competente.



Puede acordar la realización de inspecciones periódicas o, si lo considera pertinente, firmar un contrato de mantenimiento con tal organización.

- Se recomienda firmar un contrato de servicio con el departamento de servicio de Leica.
- Para las tareas de mantenimiento y reparación, sólo deben emplearse repuestos originales.

## Reparación y trabajos de servicio

- Sólo está permitido utilizar piezas de repuesto originales de Leica Microsystems.
- Antes de abrir los instrumentos, apáguelos y desenchufe el cable de conexión a la red eléctrica.
- Evite el contacto con los circuitos eléctricos con corriente, que puede ocasionar lesiones.

## Dirección de servicio

En caso de que se presente algún problema, comuníquese con nosotros:

*Leica Microsystems (Schweiz) AG  
Industry Division  
Max Schmidheiny Strasse 201  
CH-9435 Heerbrugg (Suiza)  
Teléfono: +41 71 726 33 28*

## Datos eléctricos y condiciones ambientales

### Sustitución del fusible



Desenchufe el instrumento antes de cambiar los fusibles. El modelo Leica DM750 tiene dos fusibles, situados detrás del receptáculo del cable de alimentación.



Use únicamente fusibles de este tipo: 5×20 mm, 3.15 A 250 V, de acción rápida (nº 13RFAG300002)

### Datos eléctricos:

Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 3 W

### Fuente de alimentación del módulo de cámara, USB o externa

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0.5 A

Salida: 5 V CC (SELV), 2.4 A, 12 W máx.

### Ambiente

Temperatura de uso	+10 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +52 °C +50 °F ... +104 °F
Impacto por manipulación	25 mm sobre madera dura de 50 mm
Impacto por traslado (sin embalaje)	100 g / 6 ms
Impacto por traslado (con embalaje)	800 mm caída libre
Vibraciones por traslado (sin embalaje)	5–200 Hz / 1.5 g
Presión atmosférica "de uso" y de almacenamiento:	500–1.060 mBares
Humedad "de uso" y de almacenamiento:	20–90%
Categoría de instalación II (Categoría de sobrevoltaje)	
Grado de contaminación 2	

# Leica DM750

## Introducción

Gracias por adquirir el microscopio compuesto Leica DM750 de Leica Microsystems. Las características exclusivas de este modelo y su amplia gama de accesorios lo convierten en un instrumento versátil y de gran calidad para aplicaciones clínicas rutinarias y educativas.



Aténgase a las instrucciones acerca del uso previsto de este instrumento. Un uso indebido puede resultar peligroso.

- Extraiga con cuidado el microscopio y sus componentes del embalaje de cartón.
- Compruebe que todos los componentes se encuentren como se indica en el plano de configuración.
- Los elementos opcionales como los accesorios de contraste, los adaptadores de cámara y las fundas de transporte no se incluyen en el suministro como parte del equipo estándar. Estos elementos se entregarán en embalajes por separado.
- Conserve el material de embalaje. El material de embalaje servirá para almacenar y transportar el instrumento con seguridad en caso necesario.



# ¡Preparados!

## Iluminación de platina inferior

### Iluminación de platina inferior



El microscopio Leica DM750 se puede adquirir con dos tipos de iluminación de platina inferior. Identifique qué tipo de iluminación tiene, ya que en una etapa posterior es importante conocer este dato.

### Tipo 1: Iluminación estándar

Centraje del condensador ajustable con la herramienta suministrada.



### Tipo 2: Iluminación Koehler

Centraje del condensador ajustable mediante tornillos de mariposa y diafragma de campo Koehler ajustable.



# Montaje de los tubos visores

## Herramienta utilizada

- Llave Allen



Hay dos tipos de tubos visores. Determine cuál es el tubo del que dispone:



*Tipo 1: Tubo visor Leica EZ con oculares integrados.*



*Tipo 2: Tubo visor estándar con oculares por separado*

1. Desatornille ligeramente el tornillo de ajuste (situado en la parte superior del estativo) con la llave Allen suministrada.



2. Introduzca la cola de milano en la base del estativo y apriete el tornillo de ajuste sin forzarlo. De esta forma colocará de forma precisa el tubo visor en el eje óptico del microscopio, independientemente de la rotación deseada.



## Tubo visor Leica EZ – oculares integrados



*Tubo visor Leica EZ con oculares integrados.*



Para girar el tubo visor Leica EZ, suelte el tornillo de ajuste del estativo o sustitúyalo por el tornillo de mariposa prisionero (opcional).

1. Para usar el tornillo de mariposa prisionero opcional, extraiga el tornillo de ajuste que viene con el estativo.



Asegúrese de que la parte del tornillo de mariposa prisionero esté totalmente aflojada antes de montarlo en el estativo:




2. Vuelva a colocar el tubo visor Leica EZ en su posición sobre el estativo.




3. Monte el tornillo de mariposa prisionero con ayuda de la llave que viene con dicho tornillo.



## Tubo visor Leica EZ – oculares integrados (cont.)

 Ahora ya puede girar de forma segura el tubo visor Leica EZ aflojando el tornillo de mariposa prisionero, girando el tubo visor y volviendo a apretar el tornillo de mariposa prisionero.

 Los oculares vienen integrados en el tubo visor Leica EZ, preajustados para una observación correcta; por lo tanto, no es necesario realizar ajustes ni montajes de oculares.



Vaya a la sección "[Protectores oculares](#)" en la página 24.

## Tubo visor estándar de Leica – oculares por separado



*Tubo visor estándar; los tubos visores no incluyen oculares*



El tubo visor estándar está provisto de una cola de milano giratoria. Por lo tanto, ahora se puede girar libremente el tubo visor en cualquier dirección.

1. Introduzca los oculares en los tubos visores.




2. Ajuste los oculares en los tubos visores apretando los tornillos plateados situados en la parte inferior de los tubos visores con un destornillador de cruz (Phillips) estándar (no suministrado).




Los oculares seguirán girando, pero quedarán ajustados en los tubos visores.

## Protectores oculares

 Si usa gafas para la observación con microscopio, deje plegados los protectores oculares de goma. Si no usa gafas, puede resultarle útil desplegar los protectores oculares de goma para bloquear la luz del entorno.



 Si ha adquirido una configuración de microscopio estándar, verá que los objetivos están instalados en el revólver y que el condensador de platina inferior está montado en el estativo. En este caso, vaya a la sección "[Funcionamiento](#)" en la página 29. Si ha adquirido el modelo Leica DM750 por componentes en lugar de con configuración estándar, vaya a la sección "[Montaje de objetivos](#)" en la página 25.

# Montaje de objetivos

## Montaje de objetivos




Gire siempre el revólver usando el anillo moleteado del revólver.

*Mientras gira el revólver en el sentido de las agujas del reloj, monte los objetivos atornillándolos en los orificios del revólver, comenzando por el aumento más bajo hasta llegar al aumento más alto.*



## Montaje del condensador de platina inferior

### Condensador de platina inferior

 El microscopio Leica DM750 cuenta con una montura abierta para el condensador de platina inferior; por ello, es necesaria la instalación del condensador.



*La montura del condensador de platina inferior está abierta*

1. Eleve la platina a su posición máxima usando el botón de enfoque macrométrico situado en el lateral del microscopio.



2. Ajuste la montura del condensador en su posición más baja mediante el botón de enfoque del condensador situado en el lateral izquierdo de la platina inferior.



3. Afloje completamente los dos tornillos de ajuste (o tornillos de mariposa si se trata de una platina Koehler) en la montura del condensador.



## Montaje del condensador de platina inferior (cont.)

4. Deslice el condensador de platina inferior en la montura del condensador situado bajo la platina, alineando el perno de posicionamiento en la parte inferior del condensador en la ranura situada en la parte trasera de la horquilla.




5. Eleve el condensador a su posición máxima mediante el botón de enfoque del condensador situado en el lateral izquierdo de la platina inferior.



6. Apriete por igual los dos tornillos de ajuste con la herramienta suministrada (o bien, apriete los tornillos de mariposa si se trata de una platina Koehler) de modo que la lente superior del condensador quede centrada bajo el objetivo en posición de servicio para realizar un centrado aproximado del condensador de platina inferior.



 Podrá efectuar un centrado más preciso del condensador cuando llegue a la sección "Centraje completo del condensador" en la página 30.



# ¡Listos!

## Encendido del microscopio

### Superficie de trabajo



Use siempre el microscopio sobre una superficie rígida y estable.

### Cable de alimentación



Si no ha conectado el cable, conéctelo firmemente en la parte posterior del microscopio.



### Ajuste de la intensidad de iluminación



Ajuste el botón de control (situado en la parte inferior del estativo del microscopio) en el ajuste más bajo al principio. El botón de control de la iluminación le permite ajustar la intensidad de la luz procedente del sistema de iluminación.




### Enchufe y encienda el microscopio

1. Enchufe el cable de alimentación del microscopio en una toma con puesta a tierra. Se suministra un cable de 3 hilos con puesta a tierra.
2. Encienda el microscopio con el interruptor situado en la parte inferior derecha del estativo del microscopio.




## Centraje completo del condensador

 Si ha adquirido el modelo Leica DM750 con configuración estándar, el condensador viene previamente centrado por Leica Microsystems. Vaya a la sección "Apertura del condensador", en la página 43.

1. Abra la apertura del condensador girando el anillo moleteado del condensador hacia la izquierda.




 Asegúrese de que el condensador se encuentra en su posición más elevada


2. Dibuje una "X" en un papel del tamaño de una tarjeta de visita y colóquelo en la salida de la luz del estativo del microscopio, de modo que la "X" quede centrada sobre la iluminación.



3. Observe por los oculares y sírvase de la herramienta suministrada con los tornillos de ajuste (o bien los tornillos de mariposa si se trata de un Leica DM750 con iluminación Koehler) para centrar el condensador en forma más precisa. Para ello, observe la X y céntrela en el campo visual apretando los tornillos.

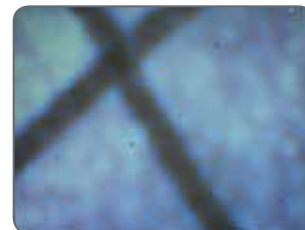

*No centrado*

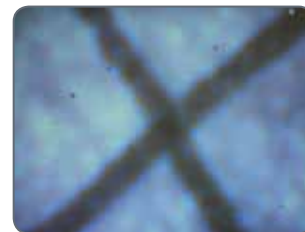

*Centrado*

## Centraje completo del condensador (cont.)

4. Si posee un microscopio Leica DM750 con iluminación estándar (sin diafragma de campo Koehler), ahora tiene la posibilidad de bloquear el condensador en su posición mediante los tornillos de ajuste situados en los laterales de la parte trasera de la horquilla del condensador sirviéndose de la herramienta suministrada.



Si posee un microscopio Leica DM750 con diafragma de campo Koehler podrá efectuar un centraje y enfoque del condensador más preciso cuando llegue a la sección "[Ajuste Koehler](#)" en la página 37.



*Tornillo de ajuste*

## Uso del condensador

### Uso del condensador



El condensador dispone de un diafragma iris que se puede ajustar para que coincida con la apertura numérica efectiva del objetivo.

1. Para abrir y cerrar este diafragma iris, gire el anillo moleteado del condensador a la derecha o a la izquierda de forma que la línea del anillo giratorio coincida con el enfoque de objetivo que esté utilizando.
2. Para empezar, abra completamente el diafragma de iris del condensador de apertura girando el condensador a la derecha hasta el tope.



*Haga coincidir la línea del anillo giratorio con el enfoque de objetivo que esté utilizando.*

## Preparación para la observación de un filtro con muestra

1. Coloque el filtro con muestra en la platina deslizando el filtro hacia el interior de las sujeciones de filtro.
2. Use el control de platina X/Y para colocar el filtro de forma que una parte de la muestra quede bajo el objetivo que esté utilizando.



Las sujeciones de filtro sujetan el filtro en



su sitio.  
*Sujeciones de filtro*



## Enfoque (ajuste de la nitidez)

1. Gire el revólver (usando el anillo moleteado del revólver) para colocar en posición de trabajo el objetivo de menor aumento.




2. Eleve la platina girando el botón de ajuste del enfoque macrométrico hasta el tope positivo en la posición más elevada.



*Botón de ajuste del enfoque macrométrico*

3. Observe por los oculares y ajuste la intensidad de la iluminación de forma que la observación sea cómoda.

 El estativo del microscopio Leica DM750 viene ajustado de fábrica, de modo que el enfoque de la platina se encuentra a 1.5 giros del enfoque micrométrico desde esta posición.

4. Mediante el botón de ajuste del enfoque micrométrico, enfoque la muestra hasta que se vea nítida.




# Ajuste del tubo visor

## Ajuste de los oculares

1. Ajuste los oculares a la distancia entre los ojos. Pliegue o despliegue los oculares para disminuir o aumentar la distancia entre los oculares hasta que vea un círculo iluminado.



 Los tubos visores mantienen una longitud constante de tubo en todas las distancias entre ojos. Esto significa que, aunque cambie la distancia entre los ojos, no se modifican la parfocalidad, el aumento ni las calibraciones que dependen del aumento.

## Tubo visor Leica EZ

- Si está utilizando un tubo visor Leica EZ, que dispone de oculares integrados, no es necesario realizar ningún ajuste. Asegúrese de que lleva puestas sus gafas o lentillas.
- Si posee un DM750 con iluminación estándar (sin diafragma de campo Koehler), vaya a la sección "[Técnica de inmersión en aceite](#)" en la página 39.
- Si posee un Leica DM750 con diafragma de campo Koehler, vaya a la sección "[Ajuste Koehler](#)" en la página 37.

## Tubo visor estándar con dos oculares fijos

- Si está utilizando un tubo visor estándar con dos oculares fijos (sin oculares de enfoque), no es necesario realizar ajustes. Asegúrese de que lleva puestas sus gafas o lentillas.
- Si posee un Leica DM750 con iluminación

estándar (sin diafragma de campo Koehler), vaya a la sección "[Técnica de inmersión en aceite](#)" en la página 39.

- Si posee un Leica DM750 con diafragma de campo Koehler, vaya a la sección "[Ajuste Koehler](#)" en la página 37.

## Tubo visor estándar con uno o dos oculares de enfoque

Si está utilizando un tubo visor estándar con uno o dos oculares de enfoque, es necesario realizar algunos ajustes:

1. Ajuste los oculares de enfoque a la dioptría "0".



## Ajuste del tubo visor (cont.)



Si la observación al microscopio le resulta más cómoda con sus lentes correctoras (lentes de contacto o gafas), déjeselas puestas y casi no será necesario realizar ajustes.

- Enfoque la muestra mediante el botón de ajuste de enfoque micrométrico del microscopio mientras mira por uno de los oculares (si dispone de un ocular enfocable y de otro no enfocable, mire esta vez por el ocular no enfocable). Para un enfoque más sencillo, cúbrase o cierre el otro ojo.



- A continuación observe únicamente a través del otro ocular (ocular de enfoque) con el otro ojo. Esta vez, enfoque la muestra usando la función de enfoque del ocular de enfoque.



No modifique la altura de la platina para ajustar el enfoque.

- Coja con una mano la pieza moleteada del ocular de enfoque y gire la parte superior del ocular con la otra mano hasta que la muestra quede enfocada usando este ojo

y este ocular de enfoque. De esta forma corregirá cualquier diferencia existente entre la visión del ojo izquierdo y el derecho.

- Ahora observe usando un objetivo con más aumento (no un objetivo de uso con aceite) y ajuste el enfoque del microscopio mientras mira con ambos ojos.



Los aumentos más altos tienen menos profundidad de campo. Por lo tanto, una vez ajustado el enfoque con un gran aumento, comprobará que al reducir el aumento únicamente debe ajustar el enfoque micrométrico, si es que es necesario.

- Si su DM750 está equipado con iluminación estándar, vaya a la sección "[Técnica de inmersión en aceite](#)" en la página 39.
- Si su DM750 está equipado con ajuste Koehler, vaya a la siguiente sección "[Ajuste Koehler](#)" en la página 37.

## Ajuste Koehler



Si su microscopio Leica DM750 está equipado con un diafragma de campo para iluminación Koehler, emplee el siguiente procedimiento para asegurar un buen centraje y enfoque del condensador.

1. Cierre el diafragma de campo Koehler en la base del microscopio de modo que las hojas del iris estén presentes en el campo visual al observar por los oculares.



*Cierre el diafragma de campo Koehler*



*Cierre el diafragma de campo Koehler*

2. Use el botón de enfoque del condensador situado en el lateral izquierdo de la platina inferior para enfocar las hojas del diafragma de campo hasta que se vean nítidas.



*Botón de enfoque del condensador*



*Las hojas están enfocadas*

## Ajuste Koehler (cont.)

3. Gire simultáneamente los tornillos de mariposa para el centraje del condensador para centrar la imagen del diafragma de campo.



4. Abra el diafragma de campo hasta que las hojas del iris desaparezcan del campo visual.



## Técnica de inmersión en aceite

1. Encuentre el campo de visión del filtro que desea observar.



3. Vierta una gota de aceite de inmersión de Leica en el filtro de muestra, sobre la zona de la muestra que esté observando.



4. Coloque el objetivo de inmersión de aceite en su posición (el objetivo tiene la etiqueta "OIL")



2. Reduzca la altura de la platina hasta la posición más baja usando el botón de enfoque macrométrico.

## Técnica de inmersión en aceite (cont.)


5. Eleve ligeramente el filtro usando el botón de enfoque macrométrico hasta que la gota de aceite del filtro de prueba quede en contacto con la parte frontal de la lente del objetivo de inmersión en aceite.



6. Sostenga el anillo moleteado del revólver y muévelo hacia atrás y hacia delante para eliminar cualquier burbuja de aire; a continuación, coloque el objetivo de inmersión en aceite en su posición de forma que el aceite quede entre la lente frontal del objetivo y el filtro de muestra.

7. Mire por el microscopio y gire el botón de enfoque micrométrico ligeramente para elevar la platina hasta que la muestra quede enfocada.
8. Cuando termine de usar el objetivo de inmersión en aceite, asegúrese de limpiar la parte frontal del objetivo, el filtro de muestra y cualquier otra superficie que haya estado en contacto con el aceite, siguiendo las instrucciones que se detallan en la sección "Cuidado del microscopio" en la página 45.

## Desconexión retardada

 El microscopio Leica DM750 está equipado con una función de desconexión retardada que desconecta automáticamente la iluminación después de 2 horas sin cambios en el control de la intensidad.


- Todos los estativos con revólver de cuatro posiciones tienen la desconexión retardada activada de forma estándar (en gran parte, para aplicaciones educativas).
- Todos los estativos con revólver de cinco posiciones tienen la desconexión retardada desactivada de forma estándar (en gran parte, para aplicaciones clínicas).

### Modificación del estado de la desconexión retardada

1. Conecte el encendido.
2. Gire el control de intensidad hasta la intensidad máxima y a continuación vuelva a la intensidad mínima en un intervalo de 5 segundos.



- La iluminación LED parpadea indicando que el estado de la desconexión retardada ha sido modificado.
- Si desactiva la desconexión retardada, la iluminación LED parpadea dos veces lentamente y permanece iluminada.
- Si activa la desconexión retardada, la iluminación LED parpadea tres veces rápidamente y permanece iluminada.

 Cuando apague el instrumento y vuelva a encenderlo, el sistema se encontrará en el último estado de desconexión retardada (activada o desactivada) y la iluminación LED parpadeará.



iYa!

## ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya!

Ahora lo único que tiene que hacer es cambiar los objetivos, ajustar de forma adecuada la apertura del condensador (y del diafragma de campo si se trata de un estativo Koehler DM750) en función del aumento de objetivo que esté usando y disfrutar de la observación.



# Cuidado del microscopio

# Mantenimiento general

## General



Coja el microscopio utilizando siempre ambas manos. Con este propósito, el microscopio tiene un asa en la parte posterior y un hueco en la parte delantera.



- El enrollador del cable le permite alargar el cable justo en la medida necesaria.



- Mantenga limpios todos los componentes ópticos. La limpieza es importante para una observación correcta.
- Cubra el microscopio con la cubierta de plástico (suministrada con el instrumento) siempre que no lo esté utilizando.
- En caso de que cualquier superficie óptica se cubra de polvo o suciedad, límpiela soplando con una jeringa o cepíllela con un cepillo de pelo de camello; si la suciedad persiste, frote suavemente con un paño.
- Limpie las superficies ópticas con un paño sin pelusas, un trapo para lentes o un algodón humedecido con metanol o un limpiacristales de los habituales en el mercado. No use alcohol.
- Es muy importante evitar el uso excesivo de disolventes: úselos con medida. Humedezca con disolvente el paño sin pelusas, el trapo para cristales o el algodón sin empaparlo, de forma que el disolvente no se escurra por la lente.

## Mantenimiento general (cont.)

- La lente frontal del objetivo es la parte del microscopio donde tiende a acumularse más suciedad, polvo y grasa. Si observa falta de contraste, visión nublada o escasa definición, compruebe el estado de la lente frontal utilizando un aumento.
- Los objetivos de aumento más bajo tienen lentes frontales relativamente grandes y se pueden limpiar con un paño o un trapo para cristales envuelto en un dedo y humedecido con metanol.
- La limpieza de los objetivos de 40× y de 100× exige mayor precaución. Nota: Para conseguir el alto grado de nivelación que se obtiene con los objetivos de gran aumento, el objetivo dispone de una lente frontal cóncava con un radio de curvatura bastante corto. La superficie de esta lente frontal se puede limpiar con un bastoncillo de algodón o un pequeño fragmento de algodón. Humedezca el algodón con metanol y escúrralo hasta que esté casi

seco (no use alcohol). Limpie suavemente la lente frontal sin apretar demasiado y sin frotar. Asegúrese de que el algodón esté en contacto con la superficie cóncava de la lente. Compruebe el estado del objetivo utilizando un aumento después de limpiarlo.

- Si es necesario retirar el visor del microscopio, procure no tocar de forma accidental la superficie exterior de la lente (situada en la parte inferior del visor). Las huellas dactilares en esta superficie reducen la claridad de la imagen. Limpie esta lente del mismo modo que los objetivos y los oculares.

### Mantenimiento de la mecánica

- Utilice la funda contra el polvo. Es la mejor manera de mantener el microscopio en buenas condiciones mecánicas y físicas.
- El microscopio Leica DM750 posee un acabado duradero. Todos los componentes

no ópticos del instrumento pueden limpiarse con metanol, nafta, o agua y jabón (no utilice alcohol). Evite el uso de otros disolventes orgánicos cuando limpie el instrumento.

### Iluminación

- El modelo Leica DM750 emplea iluminación LED. Por lo tanto, no es necesario cambiar ninguna lámpara durante la vida útil del microscopio.

# Dimensiones

